


Oftalmoscopios ri-scope® L

Todos los oftalmoscopios ri-scope® L de diseño modular destacan por la ergonomía mejorada y su óptica de alto rendimiento con lente condensadora esférica que permite una visión con reflexión reducida, aún en caso de pupilas contraídas. Los nuevos oftalmoscopios ri-scope® L disponen de un apoyo para el pulgar, para estabilizar el oftalmoscopio, y todos los elementos se pueden manejar fácilmente con un solo dedo.

ri-scope® L1

Diafragmas L1

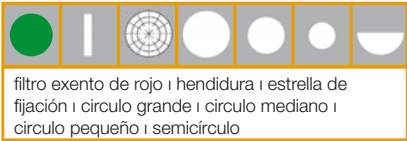

El modelo básico económico con todas las funciones básicas importantes

- Ruedecilla de lentes con 29 lentes correctoras
D+ 1-10, 12, 15, 20, 40
D- 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
- Con ruedecilla de diafragmación y semicírculo de fácil uso, diafragma circular pequeño/mediano/grande, estrella de fijación, rendija y filtro exento de rojo con intensificación del contraste.
- Óptica de alto rendimiento con lente condensadora esférica
- Trayectoria paralela del haz
- Protección contra el polvo

ri-scope® L2

Diafragmas L2



Filtros




El modelo básico avanzado con filtros separados, azules, de polarización y exentos de rojo aplicables para cada diafragma.


- Ruedecilla de lentes con 29 lentes correctoras
D+ 1-10, 12, 15, 20, 40
D- 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
- Con ruedecilla de diafragmación y semicírculo de fácil uso, diafragma circular pequeño/mediano/grande, estrella de fijación y rendija
- Incluye una rueda de filtros aplicable a todos los diafragmas con indicador de símbolos, filtro azul, de polarización y exento de rojo.
- Óptica de alto rendimiento con lente condensadora esférica
- Trayectoria paralela del haz
- Protección contra el polvo

ri-scope® L3

Diafragmas L3

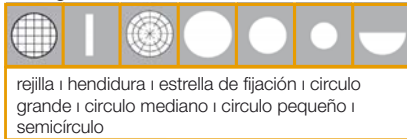


Filtros

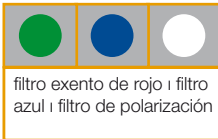

La versión más completa con dispositivo focalizador y 89 valores de dioptrías en pasos individuales.

- Con lentes correctoras para 89 valores de dioptrías
D+ 1-45 en pasos individuales
D- 1-44 en pasos individuales
- Con ruedecilla de diafragmación y semicírculo de fácil uso, diafragma circular pequeño/mediano/grande, estrella de fijación, rendija y rombo
- Incluye una rueda de filtros aplicable a todos los diafragmas con indicador de símbolos, filtro azul, de polarización y exento de rojo.
- Dispositivo de focalización con enclavamiento en posición cero para una rápida de la ametropía.
- Protección contra el polvo

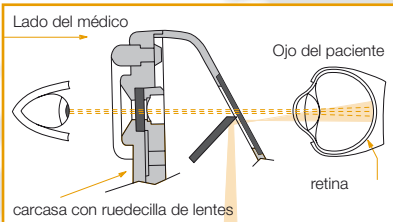

La separación de los rayos de observación y de iluminación paralelos evita reflejos en la córnea y en el iris (principio de Gullstrand). Se visualiza toda la zona iluminada de la retina - incluso con pupilas contraídas. Se crean condiciones óptimas para exploraciones oftalmológicas.

sin dispositivo antirrobo
N° 10568 HL 2,5 V
N° 10569 XL 3,5 V
con dispositivo antirrobo
N° 10569-301 XL 3,5 V

sin dispositivo antirrobo
N° 10570 HL 2,5 V
N° 10571 XL 3,5 V
con dispositivo antirrobo
N° 10571-301 XL 3,5 V

sin dispositivo antirrobo
N° 10572 HL 2,5 V
N° 10573 XL 3,5 V
con dispositivo antirrobo
N° 10573-301 XL 3,5 V

Lentes correctoras L1/L2

D+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	40	
D-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	35

Las lentes correctoras de +40 hasta -35 dioptrías garantizan una imagen nítida, incluso con anomalías de refracción muy pronunciadas.

